

Osobní váha

F2298 - osobní digitální váha s měřením tělesného tuku a vody v těle

Osobná váha

F2298 - osobná digitálna váha s meraním telesného tuku a vody v tele

Návod k obsluze – Návod na obsluhu



VII/18 CZ, SK

Isolit-Bravo spol. s r.o.

561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

Předpokládané použití:

Osobní váha (dále jen přístroj) je určena pouze pro použití v domácnosti. Je určen k vážení osob. Přístroj nesmí být použitý pro určování hmotnosti v obchodním styku, pro výpočet poplatku a sankcí, v soudnictví, v lékařství, ve farmaceutických laboratořích, k určování cen a k dalším účelům specifikovaných v bodu 1 § 2 a nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Osobní váha takéž zjišťuje tělesný tuk a obsah vody v těle, a to pomocí nepatrného elektrického proudu, který není pro uživatele nebezpečný.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si pozorně celý návod před použitím a pak jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Baterie umístíte dle uvedené polaritu (+, -).
- Zabráňte zkratu baterií vodivými předměty (klíče, šroubovák).
- Nestoupejte na okraj váhy.
- Nepoužívejte přístroje v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny.
- Nepoužívejte organické tekutiny k čištění přístroje.
- S přístrojem neházejte ani netřepte.
- Váhu nevystavujte žádnému zdroji tepla.
- Do přístroje vkládejte vždy stejné typy a stejně nové baterie.
- Vyměňte baterie z výrobku pokud ho dlouhodobě nepoužíváte.
- Použité baterie odevzdejte na určených místech pro likvidaci baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Pro směrodatné údaje je vhodné použít přístroj ve stejnou denní dobu nejlépe v podvečer před jídlem.
- Nepřekračujte maximální zatížení přístroje.
- S přístrojem při přemísťování zacházejte opatrně. Je zakázáno posunovat přístroj po podlaže prudkými pohyby, kopáním atd. Přístroj pouze zvedejte.
- Přístroj nerozebírejte a neopravujte, odstranění závad svěřte odbornému servisu.
- **Osobní digitální váhu nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor anebo jiný lékařský elektronický přístroj, jehož činnost by mohl ovlivnit elektrický proud.**
- **použití není doporučeno pro děti do deseti let, těhotné ženy, osoby s dialýzou a osoby s otoky nohou.**
- **Určité kolísání údajů tělesné váhy a tuku na displeji je normální.**
- Měření provádějte vždy naboso s čistými nohami.
- Dehydratace a těžká jídla způsobují odchylky v měření.
- Nevažte se v ponožkách pokud chcete změřit tělesný tuk a vodu v těle.

Predpokladané použitie:

Osobná váha (ďalej len prístroj) je určena iba na použitie v domácnosti. Je určený k váženiu osob. Prístroj nesmie byť použitý pre určovanie hmotnosti v obchodnom styku, pre výpočet poplatku a sankcií, v súdnictve, v lekárstve, vo farmaceutických laboratóriách, na určovanie cien a k ďalším účelom špecifikovaných v bode 1 §2 a nariadenia vlády č. 399/1999 Z.z.

Osobná váha tiež zisťuje telesný tuk a obsah vody v tele, a to pomocou nepatrného elektrického prúdu, ktorý nie je pre užívateľa nebezpečný.

Bezpečnostné upozornenie:

- Prečítajte si pozorne celý návod pred použitím a potom ho uschovajte pre prípadnú neskoršiu potrebu
- Batérie umiestnite podľa uvedenej polaritu (+, -).
- Zabráňte skratu batérií vodivými predmetmi (klúče, skrutkovač).
- Nestúpajte na okraj váhy
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
- Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne.
- Nepoužívajte organické tekutiny na čistenie prístroja.
- S prístrojom nehádzajte ani netrepte.
- Váhu nevystavujte žiadnemu zdroju tepla
- Do prístroja vkladajte vždy rovnaké typy a rovnako nové batérie.
- Vyberte batérie z prístroja ak ju dlhodobo nepoužívate.
- Použité batérie odovzdajte na určených miestach pre likvidáciu batérií.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Pre smerodatné údaje je vhodné použiť prístroj v stejnú dennú dobu najlepšie v podvečer pred jedlom.
- Nepřekračujte maximálnu záťaž prístroja
- S prístrojom při přemísťování zachádzajte opatrne. Je zakázané posúvať prístroj po podlahe prudkými pohybmi, kopáním atď. Prístroj iba zdvíhajte.
- Prístroj nerozoberajte a neopravujte, odstránenie závad zverte odbornému servisu.
- **Osobní digitálna váhu nepoužívejte, pokiaľ máte kardiostimulátor alebo iný lekárske elektronický prístroj, jeho činnosť by mohol ovplyvniť elektrický prúd.**
- **použitie nie je odporučené pre deti do desiatich rokov, tehotné ženy, osoby s dialýzou a osoby s otokmi nôh.**
- **Určité kolísanie údajov telesnej váhy a tuku na displeji je normálne.**
- Meranie robte vždy naboso s čistými nohami.
- Dehydratácia a ťažké jedlá spôsobujú odchylky v meraní.
- Nevažte sa v ponožkách pokiaľ chcete zmerať telesný tuk a vodu v tele.

Uvedení do provozu:

Přístroj vjměte z krabice.

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Otevřete kryt na spodní straně váhy a vložte 2ks baterie AAA (nejsou součástí dodávky), případně vytáhněte plastový pásek mezi baterií a kontaktem bránící jejímu nechťnému zapnutí.

Použití přístroje:

Tlačítko SET (ovládání na horní straně váhy) : **zapnutí, volba nabídky a potvrzení**

- ▲ Nahoru
- ▼ Dolů

1. Vážení

- Vložte baterie 2x AAA
- Váhu umístěte na tvrdou a rovnou podlahu.
- Na displeji se zobrazí "0.0", můžete stisknutím tlačítka SET zvolit jednotky (kg, st: lb.)
- postavte se na váhu
- zůstaňte stát, dokud se nezobrazí Vaše neměřená váha.
- váha se automaticky vypne , po ukončení Vašeho vážení

2. Zadání osobních údajů - přístroj může uložit data až 12ti osob (včetně pohlaví, výšky, věku)

Nastavte osobní údaje:

- stiskněte „SET“ a pomocí tlačítek "nahoru" nebo "dolů" vyberte osobní klíč „p0-p12“ . Jakmile dosáhnete osobního klíče, který chcete použít, potvrďte stisknutím tlačítka "SET".
- stiskněte "▲ " nebo "▼ " pro výběr muže nebo ženy při pohlaví
- na obrazovce bliká symbol a pak stiskněte tlačítko "SET" pro potvrzení.
- stiskněte "▲ " nebo "▼ " pro výběr věku (10-99) a potvrďte tlačítkem "SET".
- stiskněte "▲ " nebo "▼ " pro výběr výšky (100-240), "stiskněte" SET "pro potvrzení.

3.Měření procentních a tělesných tuků a hydratace.

- postavte se holou nohu na váhu o, udržujte kontakt s elektrodami.
- nejprve se zobrazí Vaše váha, další údaj je tuk,další údaj % kosti a poslední údaj jsou kalorie KCAL .Tyto údaje se několikrát po sobě opakují na váze .Údaje si prosím porovnejte s tabulkami :

Uvedenie do prevádzky:

- Vyberte prístroj z krabice.
- Skontrolujte, či nie je poškodená prepravou.
- Otvorte kryt na spodnej strane váhy a vložte 2 ks batérie typu AAA (není súčasťou dodávky), prípadne vytiahnite plastový pásek medzi batériou a kontaktom brániace jej nechcnému zapnutiu.

Použitie prístroja:

Tlačidlo SET (ovládanie na hornej strane váhy): **zapnutie, voľba ponuky a potvrdenie**

- ▲ Hore
- ▼ Dole

1. Váženie

- Vložte batérie 2x AAA
- Váhu umiestnite na tvrdú a rovnú podlahu.
- Na displeji sa zobrazí "0.0", môžete stlačením tlačidla SET zvolit jednotky (kg, st: lb.)
- postavte sa na váhu
- zostaňte stáť, kým sa nezobrazí Vaša nemeraná váha.
- váha sa automaticky vypne, po ukončení Vášho vážení

2.Zadanie osobných údajov – prístroj môže uložiť data až 12ti osôb (vrátane pohlavia, výšky, veku)


Nastavte osobné údaje:

- stlačte "SET" a pomocou tlačidiel "nahor" alebo "nadol" vyberte osobné kľúč "p0-p12". Akonáhle dosiahnete osobného kľúča, ktorý chcete použiť, potvrďte stlačením tlačidla "SET".
- stlačte "▲ " alebo "▼ " pre výber muža alebo ženy pri pohlavia
- na obrazovke bliká symbol a potom stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.
- stlačte "▲ " alebo "▼ " pre výber veku (10-99) a potvrďte tlačidlom "SET".
- stlačte "▲ " alebo "▼ " pre výber výšky (100-240), "stlačte" SET "pre potvrde

3.Měření percentuálních a tělesných tukov a hydratacie.

- postavte sa holú nohu na váhu o, udržujte kontakt s elektrodami.
- najprv sa zobrazí Vaša váha, ďalší údaj je tuk, ďalší údaj% kosti a posledný údaj sú kalórie KCAL .Tieto údaje sa niekoľkokrát po sebe opakujú na váhe .Údaje si prosím porovnajate s tabuľkami :

ČESKY

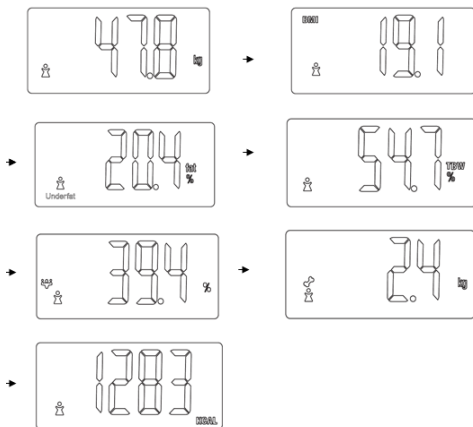

Procento tělesného tuku a normální rozmezí hydratace:

Age	Female		Male		Display
	Fat %	Hydration %	Fat %	Hydration %	
<=30	4.0-20.5	66.0-54.7	4.0-11.0	66.0-61.2	Underfat
	20.6-25.0	54.6-51.6	11.1-22.0	61.1-53.6	Healthy
	25.1-30.5	51.5-47.8	22.1-27.0	53.5-50.2	Overfat
	30.6-80.0	47.7-13.8	27.1-80.0	50.1-13.8	Obese
>30	4.0-25.0	66.0-51.6	4.0-13.0	66.0-59.8	Underfat
	25.1-30.0	51.5-48.1	13.1-24.0	59.7-52.3	Healthy
	30.1-35.0	48.0-44.7	24.1-29.0	52.2-48.8	Overfat
	35.1-80.0	44.6-13.8	29.1-80.0	48.7-13.8	Obese

Vysvětlivky :

Age : věk

Female : žena

Male : muž

Fat – tuk

Hydration – voda v těle

Underfat – pod limitem

Healthy – optimální


Overfat – nadváha

Obese – obesita

Tělesná svalová hmota a kosti / parametr :

Age	Female		Male	
	Muscle (%)	Bone (kg)	Muscle (%)	Bone (kg)
16 - 50	>30	>2.1	>38	>2.8

SLOVENSKY

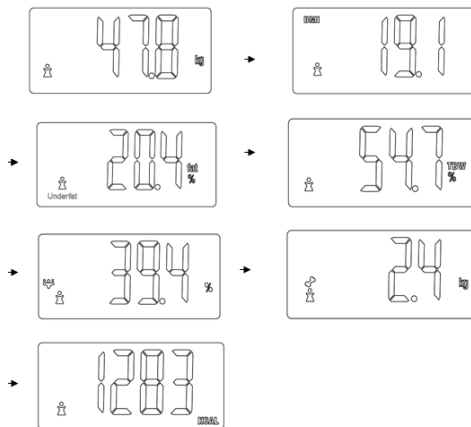

Procento telesného tuku a normálne rozmedzie hydratacie:

Age	Female		Male		Display
	Fat %	Hydration %	Fat %	Hydration %	
<=30	4.0-20.5	66.0-54.7	4.0-11.0	66.0-61.2	Underfat
	20.6-25.0	54.6-51.6	11.1-22.0	61.1-53.6	Healthy
	25.1-30.5	51.5-47.8	22.1-27.0	53.5-50.2	Overfat
	30.6-80.0	47.7-13.8	27.1-80.0	50.1-13.8	Obese
>30	4.0-25.0	66.0-51.6	4.0-13.0	66.0-59.8	Underfat
	25.1-30.0	51.5-48.1	13.1-24.0	59.7-52.3	Healthy
	30.1-35.0	48.0-44.7	24.1-29.0	52.2-48.8	Overfat
	35.1-80.0	44.6-13.8	29.1-80.0	48.7-13.8	Obese

Vysvetlivky :

Age: vek

Female: žena

Male: muž

Fat - tuk

Hydration - voda v tele

Underfat - pod limitom

Healthy - optimálna

Overfat - nadváha

Obese - obezita

Tělesná svalová hmota a kosti / parametr :

Age	Female		Male	
	Muscle (%)	Bone (kg)	Muscle (%)	Bone (kg)
16 - 50	>30	>2.1	>38	>2.8

Vysvětlivky :

Muscle : svalová hmota
 Bone : kosti
 Age:- věk
 Female : žena
 Male : muž

Energie (Kcal):

Potřebná energie se spotřebuje pro zachování dalších základních životních aktivit .

Male			
Age	Standard weight(kg)	Basic Metabolize value(Kcal/kg/day)	Metabolize value
15-17	59.8	27	1610
18-29	64.7	24	1550
30-49	67	22.3	1170
50-69	62.5	21.5	1110
>=70	56.7	21.5	1010

Female			
Age	Standard weight(kg)	Basic Metabolize value(Kcal/kg/day)	Metabolize value
15-17	51.4	25.3	1300
18-29	51.2	23.6	1210
30-49	54.2	21.7	1170
50-69	53.8	20.7	1110
>=70	48.7	20.7	1010

Upozornění :

Výše uvedené hodnoty jsou POUZE doporučující (domácí použití) – orientační.
 Pro přesné údaje a doporučené výživové hodnoty se obraťte na svého lékaře či nutričního poradce .

Odstranění potíží při provozu:

Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena podle uvedené polaroty (+, -).

Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou měřící jednotku. (lb/kg)

Zkontrolujte, aby přístroj byl na rovném povrchu.



Likvidace přístroje:

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 Sb. z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená

Vysvetlivky:

Muscle: svalová hmota
 Bone: kosti
 Age:- vek
 Female: žena
 Male: muž

Energia (Kcal):

Potrebná energia sa spotrebuje pre zachovanie ďalších základných životných aktivít

Male			
Age	Standard weight(kg)	Basic Metabolize value(Kcal/kg/day)	Metabolize value
15-17	59.8	27	1610
18-29	64.7	24	1550
30-49	67	22.3	1170
50-69	62.5	21.5	1110
>=70	56.7	21.5	1010

Female			
Age	Standard weight(kg)	Basic Metabolize value(Kcal/kg/day)	Metabolize value
15-17	51.4	25.3	1300
18-29	51.2	23.6	1210
30-49	54.2	21.7	1170
50-69	53.8	20.7	1110
>=70	48.7	20.7	1010

Upozornenie:

Vyššie uvedené hodnoty sú LEN odporúčací (domáce použitie) - orientačné.
 Pre presné údaje a odporúčané výživové hodnoty sa obraťte na svojho lekára či nutričného poradcu.

organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného dopadu.

Likvidace obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru

Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:

Maximální zatížení:	150 kg
Věkové rozpětí:	od 10 do 100 let
Výškové rozpětí:	od 100 do 250 cm
Povolená odchylka:	± 0,6 kg
Citlivost (rozlíšení):	0,1 kg
Kapacita paměti:	12 osob

Servisní zajištění:

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305

561 64 Jablonná nad Orlicí, tel.: 607035094

e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce www.isolit-bravo.cz.

Obecné podmínky záruky

Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro

Odstránenie problémov pri prevádzke:

Skontrolujte, či sú batérie správne vložené podľa uvedenej polarität (+, -).

Skontrolujte, či ste zvolili správnu meráciu jednotku.

(lb/kg)

Skontrolujte, aby prístroj bol na rovnom povrchu.



Likvidácia prístroja:

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Pri likvidácii výrobkov budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)

- na ostatných miestach "spätného odboru" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobek nesmie byť v žiadnom prípade vyhodnený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Použité batérie odovzdajte predajcovi alebo na mieste určenom pre ukládanie nebezpečného odpadu.

Likvidácia obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáček - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:

Maximána záťaž:	150 kg
Vekové rozpätie:	od 6 do 100 rokov
Výškové rozpätie:	od 100 do 250 cm
Povolená odchýlka:	± 0,6 kg
Citlivosť (rozlíšenie):	0,1 kg
Kapacita pamäti:	12 osob

profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku,

změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebované věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrzem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chyběnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čisticími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebování (např.

Servisné zaistenie:

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.isolit-bravo.cz, prípadne u dovozcu: Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina, e-mail: bravosk@stonline.sk, tel: 00420 607035126

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším národom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobek je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovědnosti za vady je možné uplatňovat u predajcu, u kterého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k opravu výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebované věci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka).** Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v príloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému poli, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti,

baterie). Firma Isolit-Bravo, spol s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není zlomen po otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), plošením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

• Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

• Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

• Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. považováno zejména:

• Opořebením výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).

• Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.

• Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.

• Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.

V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu

preťažaniu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

• Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávnymi použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)

• Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

• Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávný chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečištěného príslušenstva a náplní.

• Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo smazané štítky, poškodené plomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

• Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

• Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

• Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmlouvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

• Opořebením výrobku alebo částí výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo částí výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a struhadiel).

• Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku. • Zmena farby výhrevných ploch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných ploch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrábanie ploch.

• Zmeny funkcie a vzhledu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.

• Poškodením sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo

zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřené poplatky za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním Občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Service network of Isolit-Bravo as of 1.1.2018

Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 607 035094 Náhr. díly : 607035126
Fax.: 465 391 761
E-mail: servis@isolit-bravo.cz

- **Service network for warranty and after-sales repair of products**
- Expanded network of after-sales services for repair is provided on www.isolit-bravo.cz and www.bravospotrebece.cz

1. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, V Nových Vokovicích 78/2, tel.: 235355070, [DS]

výmencou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povaha veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnuou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamáci výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, záru. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevzme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odprodať a z predaja si uhradit' svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2018

1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.024/9588555

3. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857,0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Osobní digitální váha s tukoměrem**
Osobná digitálna váha s tukomerom

Typ: **F2298**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131

Dovozca do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**
tel: +420 607035131

Razítko prodejny a podpis prodavače:

Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja:

Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):

Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):